




mod. 001

come si usa **BENDANA**


ADDOME TORACE SAGOMATA



BREVETTATO

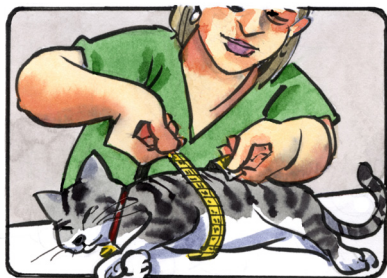


L'animale è ancora sedato, con un metro morbido misura la circonferenza del torace

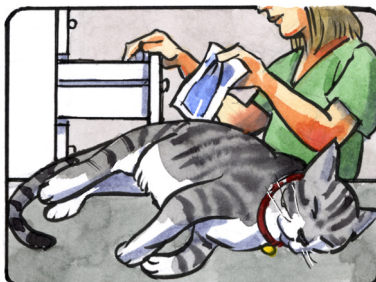


Alla misura presa, sottrai il 20% circa e in base al valore ottenuto scegli la taglia di BENDANA appropriata




Decidi se infilare due o quattro zampe, quindi misura la lunghezza dell'animale fin dove necessita (basso ventre o posteriore)

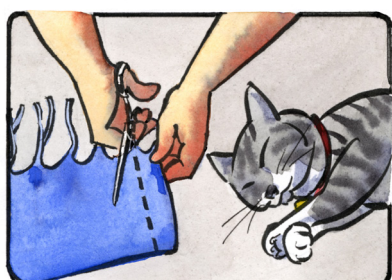


Se vuoi infilare solo due zampe, accorcia la protezione asportando una o più frange di tessuto

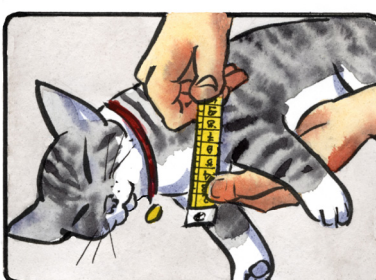


Misura l'ampiezza del petto tra le due zampe

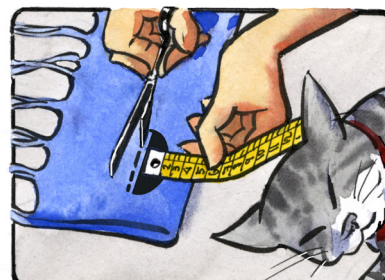

Piega in due la protezione e riporta 1/2 della misura del petto. Allarga se serve i fori a mezzaluna per le zampe

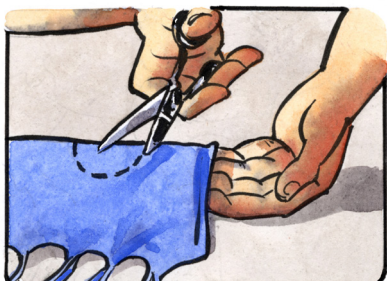

Sempre a protezione piegata, se serve, crea un foro per i genitali maschili

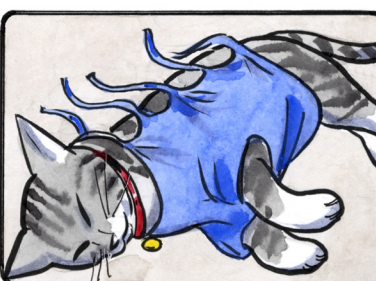

Infila le zampe nelle aperture già predisposte



Passa BENDANA sotto il fianco dell'animale e allaccialo sulla schiena con nodo e asola o con doppio nodo, tagliando l'eccedenza



Al risveglio l'animale sarà perfettamente a suo agio e protetto con BENDANA!

- Asportazione masse cutanee e noduli
- Chirurgie addominali
- Chirurgie toraciche
- Ovariectomia-Ovaristerectomia / sterilizzazione femmine
- Orchiectomia / sterilizzazione maschi

ADDOME TORACE SAGOMATA, fornita in nove taglie, è consigliata per le TIPOLOGIE D'INTERVENTI sopra indicati

- Lesioni diffuse di varia origine
- Ferite da leccamento
- Ferite da morso
- Dermatiti (es. Hot spot, atopie...)

... e per queste PATOLOGIE COMUNI



Protezione post-operatoria ad uso veterinario per animali da compagnia

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637



MADE IN ITALY




BENDANA

È una **protezione post-operatoria** ad uso veterinario, pensata per coprire completamente le medicazioni, in modo sicuro e duraturo, lasciando all'animale assoluta libertà di movimento ed eliminando ogni fastidio recatogli dall'impiego di cerotto, velcro e quant'altro. È un bendaggio elastico molto semplice da usare, adattabile in pochi passaggi ad ogni razza e taglia, facile da rimuovere anche durante i controlli di routine durante la convalescenza. È realizzato in tessuto naturale di jersey ($\geq 90\%$ cotone e $5\div 10\%$ elastene). Prodotto in vari modelli, in forme e misure diverse a seconda della parte del corpo da proteggere, fornito in due soluzioni: in articoli sagomati pronti all'uso e, per i più esperti, a nastro continuo, da tagliare secondo necessità.

PRODOTTO BREVETTATO




COME PRENDERE LE MISURE

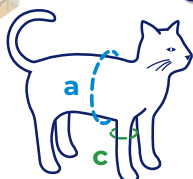


a circonferenza toracica -20% circa = **A**

c circonferenza omero = **C**

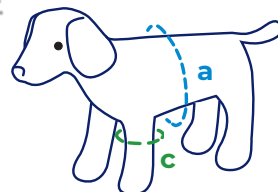

COME SCEGLIERE LE TAGLIE (MOD. 001)

ADDOME TORACE SAGOMATA

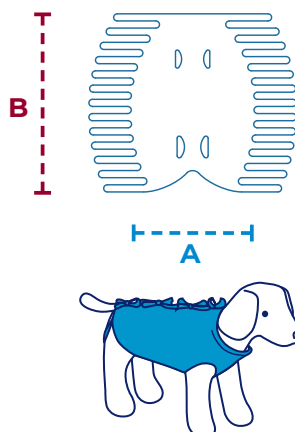


articolo	A cm	B cm	taglia	peso
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tutti i modelli sono utilizzabili per cani e gatti e indistintamente per maschi e femmine


12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001
Protezione
ADDOME TORACE
SAGOMATA

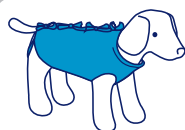

mod. 101
Protezione
ADDOME TORACE
A NASTRO

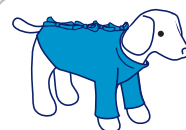


mod. 011
Protezione
ADDOME TORACE
e ARTI ANTERIORI



mod. 021
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI POSTERIORI



mod. 031
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI TUTTI

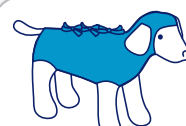

mod. 041
Protezione
TESTA COLLO e
ADD. SAGOMATA




mod. 051
Protezione
PORTA
HOLTER




mod. 052
Protezione
INTIMO COPRI
ELETTRODI



mod. 061
Protezione
ARTI ANTERIORI
CON LACCI

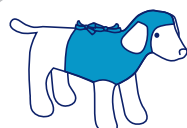

mod. 071
Protezione
TESTA COLLO e
TORACE

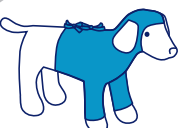

mod. 081
Protezione
TESTA COLLO
TORACE e ANT.RI



mod. 091
Protezione
TOTALE

Catalogo completo, listino e modulo d'ordine sono disponibili al sito

www.bendana.it