

# Wie wird **BENDANA** angewendet

**mod. 021** SCHUTZ FÜR BAUCH, BRUST UND HINTERBEINE



PATENTIERT



Während das Tier noch sediert ist, mit einem weichen Metermaß seinen Brustumfang messen.




Vom gemessenen Wert etwa 20% abziehen. Anhand des sich so ergebenden Wertes die sachgerechte Größe von BENDANA wählen.



Die Brustbreite messen (Distanz zwischen den beiden Beinen).



BENDANA doppelt legen und die Hälfte des genommenen Maßwertes aufmarkieren. Dann die vorhandenen halbmondförmigen Öffnungen bei Bedarf verbreitern.

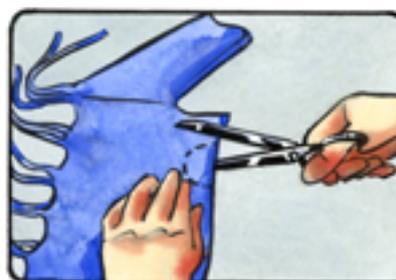

Falls erforderlich, bei zusammengefaltetem Schutz eine Öffnung für die männlichen Genitalien herstellen.



Die Hinterbeine schonend einführen



Die Vorderbeine in die hergestellten Öffnungen einführen.



BENDANA über dem Rücken zusammenschnüren.



Wenn es wieder aufwacht, fühlt sich das Tier mit BENDANA rundum wohl und geschützt!

- Entfernung Hautmassen und Knoten
- Operationen am Bauch (z. B. Enterotomie, Splenektomie ...)
- Thoraxchirurgie (z. B. Lobektomie, Perikardiotomie ...)
- Operationen an Hüfte/Knie/Becken (z. B. Dysplasie, Luxationen, Traumata ...)
- Orchiektomie / Sterilisation bei männlichen Tieren
- Ovariohysterektomie - Ovariektomie - Sterilisation bei weiblichen Tieren - Mastektomie

- Diffuse Verletzungen unterschiedlichen Ursprungs
- Leckezeme
- Bissverletzungen
- Dermatitis (z.B. Hot Spots, Atopien ...)

SCHUTZ FÜR BAUCH, BRUST UND HINTERBEINE, in neun Größen erhältlich. Empfohlen für die oben genannten ARTEN OPERATIVER EINGRIFFE.

.... und für diese HÄUFIG VORKOMMENDEN KRANKHEITEN



**Postoperativer Schutz, der in der Tiermedizin für Haustiere verwendet wird**  
T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (VI) - ITALIA  
info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






# BENDANA


Es handelt sich um einen Schutz, der in der Tiermedizin nach Operationen eingesetzt wird, um die jeweilige Medikation vollständig, sicher und dauerhaft abzudecken. Der Schutz erhält dem Tier seine volle Bewegungsfreiheit und erspart ihm das lästige Gefühl, das üblicherweise mit der Verwendung von Pflastern, Klettverschlüssen oder Ähnlichem verbunden ist. Es handelt sich um eine elastische Bandage, die sehr einfach im Gebrauch ist, sich in wenigen Schritten an jede Rasse und Größe anpassen lässt und auch für die Routinekontrollen während der Rekonvaleszenz leicht zu entfernen ist. Sie besteht aus einem natürlichem Jerseystoff ( $\geq 90\%$  Baumwolle und  $5\%$  bis  $10\%$  Elasthan). Bendana wird in Anpassung an den jeweils zu schützenden Körperteil in unterschiedlichen Modellen, Formen und Größen hergestellt. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen: als vorgeformter, gebrauchsfertiger Artikel und für erfahrene Anwender die als Endlosband, das nach Bedarf auf Länge geschnitten wird.

PATENTIERTES PRODUKT


## WIE WIRD MASS GENOMMEN?

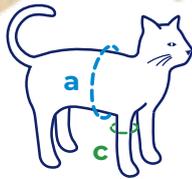

- a Brustumfang - 20% circa = A
- c Humerus-Umfang = C

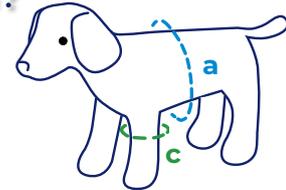

## WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSEN (MODELL 021)

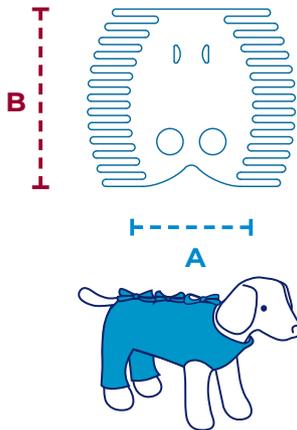

### BAUCH, BRUST UND HINTERBEINE


artikel	A cm	B cm	Größe	Gewicht
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Alle Modelle sind unterschiedslos für Hunde und Katzen verwendbar.

## 12 MODELLI PRODOTTI



**mod. 001**  
Vorgefertigter schutz für **BAUCH und BRUST**

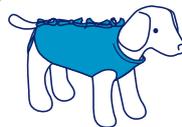

**mod. 101**  
schutz für **BAUCH und BRUST**, als Endlosband




**mod. 011**  
schutz für **BAUCH, BRUST und VORDERBEINE**



**mod. 021**  
schutz für **BAUCH, BRUST und HINTERBEINE**



**mod. 031**  
schutz für **BAUCH, BRUST und ALLE BEINE**

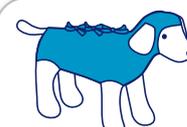

**mod. 041**  
Vorgefertigter schutz für **KOPF, HALS, BAUCH**




**mod. 051**  
schutz für **EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG**




**mod. 052**  
schutz für **EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG**



**mod. 061**  
schutz für **VORDERBEINE, MIT SCHNÜREN**

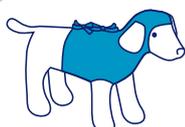

**mod. 071**  
schutz für **KOPF, HALS und BRUST**

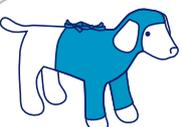

**mod. 081**  
schutz für **KOPF, HALS, BRUST und VORDERBEINE**



**mod. 091**  
**KOMPLETTSCHUTZ**

Der vollständige Katalog, die Preisliste und das Bestellformular finden Sie auf der Website

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)