



mod. 041

come si usa **BENDANA**

TESTA COLLO E ADDOME SAGOMATA



BREVETTATO



L'animale è ancora sedato, con un metro morbido misura la circonferenza del torace



In base alla misurazione (-20% circa) scegli la taglia di BENDANA appropriata



Misura l'ampiezza del petto tra le due zampe



Piega in due la protezione e riporta 1/2 della misura del petto, quindi se serve, allarga i fori per le zampe



Controlla l'ampiezza delle orecchie e se serve, allarga i due fori a mezzaluna



Infila la protezione dalla testa lasciando libere le orecchie



Infila le zampe nei fori, allargandoli se serve



Allaccia Bendana sopra la schiena con nodo e asola o con doppio nodo, tagliando l'eccedenza



Ripiega e taglia la protezione eccedente, scoprendo il muso e liberando gli occhi



Al risveglio l'animale sarà perfettamente a suo agio e protetto con BENDANA!

- Chirurgie addominali (es. enterotomia, splenectomia...)
- Chirurgia toraciche (es. lobectomia, pericardiotomia...)
- Chirurgie testa / collo (es. ferite da morso, tireodectomia...)
- Orchiectomia/sterilizzazione Maschio
- Ovaristerectomia- Ovariectomia - sterilizzazione Femmina - mastectomia

TESTA COLLO e ADDOME SAGOMATA , fornita in nove taglie, è consigliata per le TIPOLOGIE d'INTERVENTI sopra indicati

- Lesioni diffuse di varia origine
- Ferite da leccamento
- Ferite da morso
- Dermatiti (es. Hot spot, atopie..)

.... e per queste PATOLOGIE COMUNI:



BENDANA

Protezione post-operatoria ad uso veterinario per animali da compagnia

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637



MADE IN ITALY




BENDANA

É una **protezione post-operatoria** ad uso veterinario, pensata per coprire completamente le medicazioni, in modo sicuro e duraturo, lasciando all'animale assoluta libertà di movimento ed eliminando ogni fastidio recatogli dall'impiego di cerotto, velcro e quant'altro. É un bendaggio elastico molto semplice da usare, adattabile in pochi passaggi ad ogni razza e taglia, facile da rimuovere anche durante i controlli di routine durante la convalescenza. É realizzato in tessuto naturale di jersey ($\geq 90\%$ cotone e $5\div 10\%$ elastene). Prodotto in vari modelli, in forme e misure diverse a seconda della parte del corpo da proteggere, fornito in due soluzioni: in articoli sagomati pronti all'uso e, per i piú esperti, a nastro continuo, da tagliare secondo necessità.

PRODOTTO BREVETTATO




COME PRENDERE LE MISURE

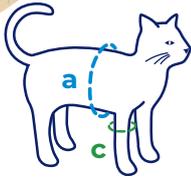


a circonferenza toracica -20% circa = **A**

c circonferenza omero = **C**

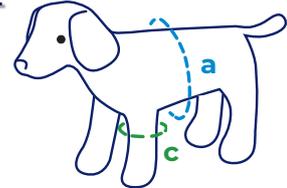

COME SCEGLIERE LE TAGLIE (MOD. 041)

TESTA COLLO E ADDOME SAGOMATA

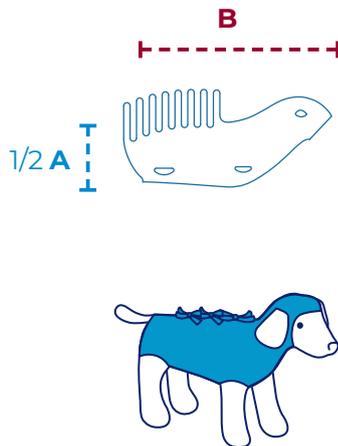


| articolo | A cm | B cm | taglia | peso |
|----------|------|------|--------|---------|
| 001.20 | 20 | 32 | XXXXS | 1 - 3 |
| 001.25 | 25 | 37 | XXXS | 3 - 5 |
| 001.30 | 30 | 44 | XXS | 5 - 7 |
| 001.35 | 35 | 50 | XS | 7 - 10 |
| 001.40 | 40 | 58 | S | 10 - 15 |
| 001.45 | 45 | 65 | M | 15 - 20 |
| 001.55 | 55 | 80 | L | 20 - 30 |
| 001.65 | 65 | 95 | XL | 30 - 40 |
| 001.75 | 75 | 110 | XXL | 40 - 50 |

Tutti i modelli sono utilizzabili per cani e gatti e indistintamente per maschi e femmine

12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001
Protezione
ADDOME TORACE
SAGOMATA

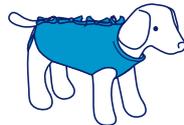

mod. 101
Protezione
ADDOME TORACE
A NASTRO



mod. 011
Protezione
ADDOME TORACE
e ARTI ANTERIORI



mod. 021
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI POSTERIORI



mod. 031
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI TUTTI



mod. 041
Protezione
TESTA COLLO e
ADD. SAGOMATA



mod. 051
Protezione
PORTA
HOLTER




mod. 052
Protezione
INTIMO COPRI
ELETTRODI



mod. 061
Protezione
ARTI ANTERIORI
CON LACCI



mod. 071
Protezione
TESTA COLLO e
TORACE

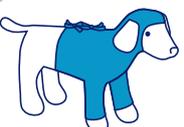

mod. 081
Protezione
TESTA COLLO
TORACE e **ANT.RI**



mod. 091
Protezione
TOTALE

Catalogo completo, listino e modulo d'ordine sono disponibili al sito

www.bendana.it