

# Wie wird **BENDANA** angewendet

mod. 041 VORGEFERTIGTER SCHUTZ FÜR KOPF, HALS UND BAUCH



PATENTIERT




Während das Tier noch sediert ist, mit einem weichen Metermaß seinen Brustumfang messen.



Anhand des Messwertes (abzüglich etwa 20%) die geeignete Größe von BENDANA auswählen.



Die Brustbreite zwischen den beiden Beinen messen.

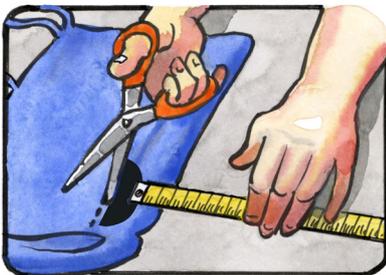

Den Schutz zweifach legen und die Hälfte des Brustmaßes aufmarkieren, dann bei Bedarf die Öffnungen für die Beine verbreitern.



Die Distanz zwischen den Ohren prüfen und nötigenfalls die beiden halbmondförmigen Öffnungen verbreitern.



Den Schutz über den Kopf ziehen, darauf achtend, dass die Ohren durch die freien Öffnungen schauen.



Die Beine in die Öffnungen einführen, die nötigenfalls zu verbreitern sind



Bendana über dem Rücken zusammenschnüren.



Den überschüssigen Teil des Schutzes umlegen und abtrennen. Die Schnauze und die Augen müssen frei liegen.



Wenn es wieder aufwacht, fühlt sich das Tier mit BENDANA rundum wohl und geschützt!

- Operationen am Bauch (z. B. Enterotomie, Splenektomie...)
- Thoraxchirurgie (z. B. Lobektomie, Perikardiotomie...)
- Operationen an Kopf/Hals (z. B. Bisswunden, Thyreidektomie...)
- Orchiektomie / Sterilisation bei männlichen Tieren
- Ovariohysterektomie - Ovariectomie - Sterilisation bei weiblichen Tieren - Mastektomie

VORGEFERTIGTER SCHUTZ FÜR KOPF, HALS UND BAUCH, in neun Größen erhältlich. Empfohlen für die oben genannten ARTEN OPERATIVER EINGRIFFE.

- Diffuse Verletzungen unterschiedlichen Ursprungs
- Leckezeme
- Bissverletzungen
- Dermatitis (z.B. Hot Spots, Atopien...)

.... und für diese HÄUFIG VORKOMMENDEN KRANKHEITEN



BENDANA

**Postoperativer Schutz, der in der Tiermedizin für Haustiere verwendet wird**

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (VI)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637



MADE IN ITALY




# BENDANA


Es handelt sich um einen Schutz, der in der Tiermedizin nach Operationen eingesetzt wird, um die jeweilige Medikation vollständig, sicher und dauerhaft abzudecken. Der Schutz erhält dem Tier seine volle Bewegungsfreiheit und erspart ihm das lästige Gefühl, das üblicherweise mit der Verwendung von Pflastern, Klettverschlüssen oder Ähnlichem verbunden ist. Es handelt sich um eine elastische Bandage, die sehr einfach im Gebrauch ist, sich in wenigen Schritten an jede Rasse und Größe anpassen lässt und auch für die Routinekontrollen während der Rekonvaleszenz leicht zu entfernen ist. Sie besteht aus einem natürlichem Jerseystoff ( $\geq 90\%$  Baumwolle und 5% bis 10% Elastan). Bendana wird in Anpassung an den jeweils zu schützenden Körperteil in unterschiedlichen Modellen, Formen und Größen hergestellt. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen: als vorgeformter, gebrauchsfertiger Artikel und für erfahrene Anwender die als Endlosband, das nach Bedarf auf Länge geschnitten wird.

PATENTIERTES PRODUKT


## WIE WIRD MASS GENOMMEN?

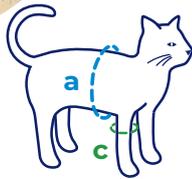

- a Brustumfang - 20% circa = A
- c Humerus-Umfang = C

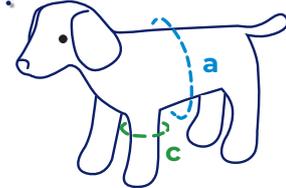

## WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSEN (MODELL 041)

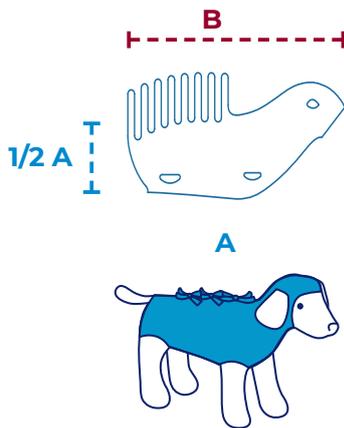

### KOPF, HALS, BAUCH


artikel	A cm	B cm	Größe	Gewicht
001.20	20	32	XXXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Alle Modelle sind unterschiedslos für Hunde und Katzen verwendbar.

## 12 MODELLI PRODOTTI



**mod. 001**  
Vorgefertigter schutz für **BAUCH und BRUST**

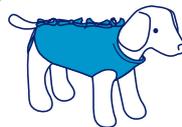

**mod. 101**  
schutz für **BAUCH und BRUST**, als Endlosband




**mod. 011**  
schutz für **BAUCH, BRUST und VORDERBEINE**



**mod. 021**  
schutz für **BAUCH, BRUST und HINTERBEINE**



**mod. 031**  
schutz für **BAUCH, BRUST und ALLE BEINE**

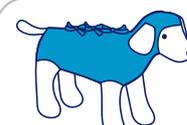

**mod. 041**  
Vorgefertigter schutz für **KOPF, HALS, BAUCH**




**mod. 051**  
schutz für **EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG**



**mod. 052**  
schutz für **EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG**



**mod. 061**  
schutz für **VORDERBEINE, MIT SCHNÜREN**

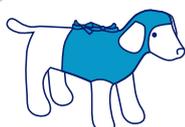

**mod. 071**  
schutz für **KOPF, HALS und BRUST**



**mod. 081**  
schutz für **KOPF, HALS, BRUST und VORDERBEINE**



**mod. 091**  
**KOMPLETTSCHUTZ**

Der vollständige Katalog, die Preisliste und das Bestellformular finden Sie auf der Website

[www.bendana.it](http://www.bendana.it)