



mod. 051

come si usa **BENDANA**
PROTEZIONE PORTA HOLTER



BREVETTATO



Materiale steso: 1. apparati elettromedicali, 2. intimo copri elettrodi, 3. protezione porta Holter



Infilare la protezione porta Holter: prima le gambe e poi la testa



Posizionare la protezione sul dorso dell'animale centrandola il più possibile



Passare il connettore in una delle due fessure predisposte sulla tasca



Infilare uno ad uno i quattro lacci nei fori predisposti



Connettere l'holter ed inserirlo nella tasca



A tasca aperta, annodare i lacci verso la coda



Annodare tutti gli altri lacci verso la testa, ad esclusione dell'ultimo



Chiudere la pattina della tasca, premendola sul velcro, perché aderisca bene



Per una ulteriore sicurezza annodare i lacci verso la testa, facendoli passare anche negli occhielli della pattina



Ecco la protezione porta Holter indossata dall'animale



Protezione post-operatoria ad uso veterinario per animali da compagnia
T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA
info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






BENDANA

É una **protezione post-operatoria** ad uso veterinario, pensata per coprire completamente le medicazioni, in modo sicuro e duraturo, lasciando all'animale assoluta libertà di movimento ed eliminando ogni fastidio recatogli dall'impiego di cerotto, velcro e quant'altro. É un bendaggio elastico molto semplice da usare, adattabile in pochi passaggi ad ogni razza e taglia, facile da rimuovere anche durante i controlli di routine durante la convalescenza. É realizzato in tessuto naturale di jersey ($\geq 90\%$ cotone e $5\div 10\%$ elastene). Prodotto in vari modelli, in forme e misure diverse a seconda della parte del corpo da proteggere, fornito in due soluzioni: in articoli sagomati pronti all'uso e, per i piú esperti, a nastro continuo, da tagliare secondo necessità.

PRODOTTO BREVETTATO




COME PRENDERE LE MISURE

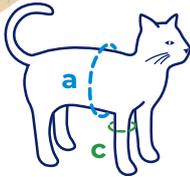


a circonferenza toracica -20% circa = **A**

c circonferenza omero = **C**

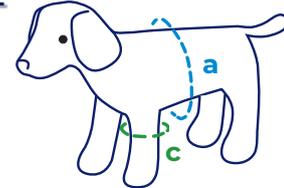

COME SCEGLIERE LE TAGLIE (MOD. 051)

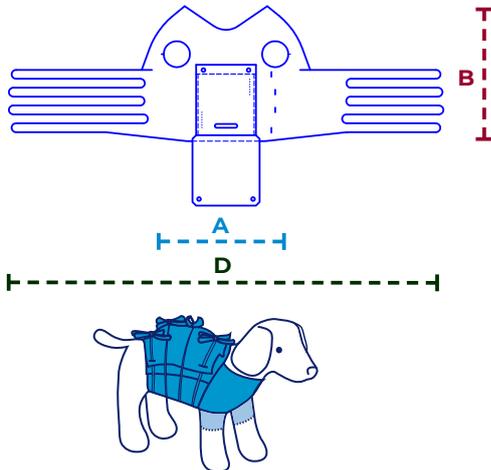

PROTEZIONE PORTA HOLTER

articolo	A cm	B cm	taglia	peso
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tutti i modelli sono utilizzabili per cani e gatti e indistintamente per maschi e femmine

12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001
Protezione
ADDOME TORACE
SAGOMATA



mod. 101
Protezione
ADDOME TORACE
A NASTRO




mod. 011
Protezione
ADDOME TORACE
e ARTI ANTERIORI



mod. 021
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI POSTERIORI



mod. 031
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI TUTTI

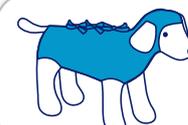

mod. 041
Protezione
TESTA COLLO e
ADD. SAGOMATA



mod. 051
Protezione
PORTA
HOLTER



mod. 052
Protezione
INTIMO COPRI
ELETTRODI



mod. 061
Protezione
ARTI ANTERIORI
CON LACCI



mod. 071
Protezione
TESTA COLLO e
TORACE



mod. 081
Protezione
TESTA COLLO
TORACE e ANT.RI



mod. 091
Protezione
TOTALE

Catalogo completo, listino e modulo d'ordine sono disponibili al sito

www.bendana.it