



Wie wird **BENDANA** angewendet

mod. 051

SCHUTZ FÜR EKG-HALTER



PATENTIERT



Ausgelegtes Material: 1. elektro-medizinische Geräte, 2. Anzug zur Elektrodenabdeckung, 3. Schutz EKG-Halter



Den Schutz des EKG-Halters anziehen: erst die Vorderbeine, dann den Kopf einführen



Den Schutz möglichst mittig auf dem Rücken des Tiers positionieren.



Führen Sie das Verbindungsteil durch einen der beiden Schlitzte an der Tasche



Die vier Schnüre nacheinander durch die dafür vorgesehenen Löcher fädeln



Das EKG anschließen und in die Tasche geben




Bei offener Tasche die Schnüre zum Schwanz hin zusammenbinden




Alle anderen Schnüre zum Kopf hin zusammenbinden (außer dem letzten!)



Die Taschenklappe schließen und den Klettverschluss andrücken, damit er gut haftet.

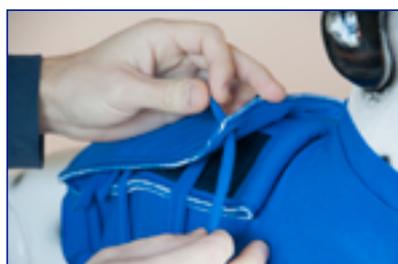

Als zusätzlichen Schutz die Schnüre zum Kopf hin zusammenbinden und sie dabei auch durch die Ösen der Klappe fädeln.

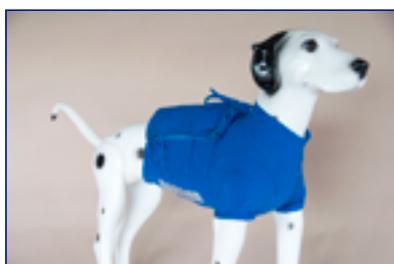

Der Schutz für den EKG-Halter für das Tier ist fertig



Postoperativer Schutz, der in der Tiermedizin für Haustiere verwendet wird

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (VI)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637



MADE IN ITALY




BENDANA


Es handelt sich um einen Schutz, der in der Tiermedizin nach Operationen eingesetzt wird, um die jeweilige Medikation vollständig, sicher und dauerhaft abzudecken. Der Schutz erhält dem Tier seine volle Bewegungsfreiheit und erspart ihm das lästige Gefühl, das üblicherweise mit der Verwendung von Pflastern, Klettverschlüssen oder Ähnlichem verbunden ist. Es handelt sich um eine elastische Bandage, die sehr einfach im Gebrauch ist, sich in wenigen Schritten an jede Rasse und Größe anpassen lässt und auch für die Routinekontrollen während der Rekonvaleszenz leicht zu entfernen ist. Sie besteht aus einem natürlichem Jerseystoff ($\geq 90\%$ Baumwolle und 5% bis 10% Elasthan). Bendana wird in Anpassung an den jeweils zu schützenden Körperteil in unterschiedlichen Modellen, Formen und Größen hergestellt. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen: als vorgeformter, gebrauchsfertiger Artikel und für erfahrene Anwender die als Endlosband, das nach Bedarf auf Länge geschnitten wird.

PATENTIERTES PRODUKT


WIE WIRD MASS GENOMMEN?

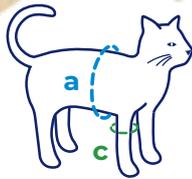

- a Brustumfang - 20% circa = A
- c Humerus-Umfang = C

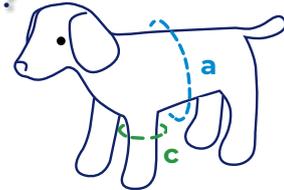

WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSEN (MODELL 051)

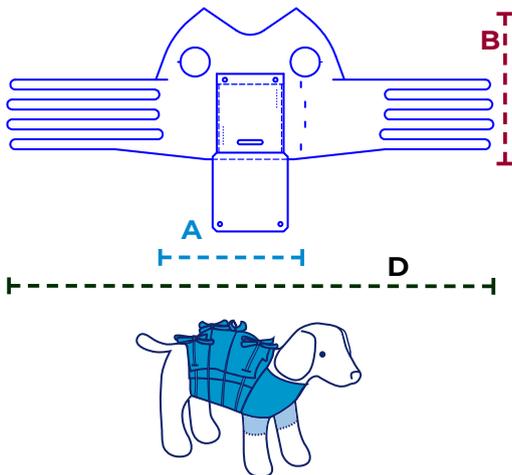

EKG-HALTER


| artikel | A cm | B cm | Größe | Gewicht |
|---------|------|------|--------|---------|
| 001.20 | 20 | 32 | XXXXXS | 1 - 3 |
| 001.25 | 25 | 37 | XXXS | 3 - 5 |
| 001.30 | 30 | 44 | XXS | 5 - 7 |
| 001.35 | 35 | 50 | XS | 7 - 10 |
| 001.40 | 40 | 58 | S | 10 - 15 |
| 001.45 | 45 | 65 | M | 15 - 20 |
| 001.55 | 55 | 80 | L | 20 - 30 |
| 001.65 | 65 | 95 | XL | 30 - 40 |
| 001.75 | 75 | 110 | XXL | 40 - 50 |

Alle Modelle sind unterschiedslos für Hunde und Katzen verwendbar.

12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001
Vorgefertigter schutz für **BAUCH und BRUST**

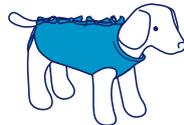

mod. 101
schutz für **BAUCH und BRUST**, als Endlosband




mod. 011
schutz für **BAUCH, BRUST und VORDERBEINE**



mod. 021
schutz für **BAUCH, BRUST und HINTERBEINE**



mod. 031
schutz für **BAUCH, BRUST und ALLE BEINE**

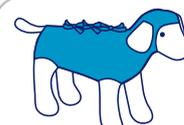

mod. 041
Vorgefertigter schutz für **KOPF, HALS, BAUCH**




mod. 051
schutz für **EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG**



mod. 052
schutz für **EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG**



mod. 061
schutz für **VORDERBEINE, MIT SCHNÜREN**

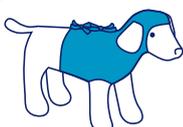

mod. 071
schutz für **KOPF, HALS und BRUST**



mod. 081
schutz für **KOPF, HALS, BRUST und VORDERBEINE**



mod. 091
KOMPLETTSCHUTZ

Der vollständige Katalog, die Preisliste und das Bestellformular finden Sie auf der Website

www.bendana.it