



come si usa **BENDANA**

mod. 052

INTIMO COPRI ELETTRODI




BREVETTATO



Materiale steso: 1. apparati elettromedicali, 2. intimo copri elettrodi, 3. protezione porta Holter



Infilare l'intimo: prima le gambe e poi la testa

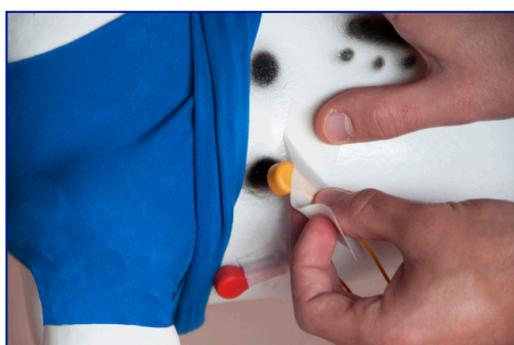

Fase di fissaggio degli elettrodi



Coprire gli elettrodi con l'intimo




Passare il connettore dentro il foro dell'intimo e sovrapporre le due pattine



Dopo aver ben sovrapposto le due pattine, fissarle con almeno due strisce di cerotto



Infilare la protezione porta Holter: prima le gambe e poi la testa

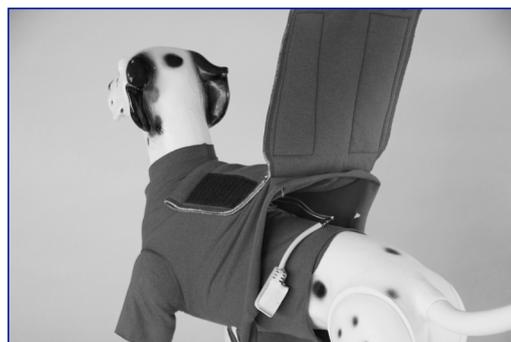

Posizionare la protezione sul dorso dell'animale centrandola il più possibile



Protezione post-operatoria ad uso veterinario per animali da compagnia
T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA
info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






BENDANA

É una **protezione post-operatoria** ad uso veterinario, pensata per coprire completamente le medicazioni, in modo sicuro e duraturo, lasciando all'animale assoluta libertà di movimento ed eliminando ogni fastidio recatogli dall'impiego di cerotto, velcro e quant'altro. É un bendaggio elastico molto semplice da usare, adattabile in pochi passaggi ad ogni razza e taglia, facile da rimuovere anche durante i controlli di routine durante la convalescenza. É realizzato in tessuto naturale di jersey ($\geq 90\%$ cotone e $5\div 10\%$ elastene). Prodotto in vari modelli, in forme e misure diverse a seconda della parte del corpo da proteggere, fornito in due soluzioni: in articoli sagomati pronti all'uso e, per i piú esperti, a nastro continuo, da tagliare secondo necessità.

PRODOTTO BREVETTATO




COME PRENDERE LE MISURE

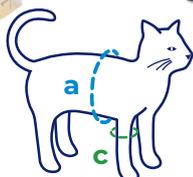



a circonferenza toracica -20% circa = **A**

c circonferenza omero = **C**

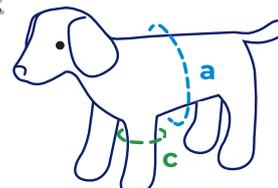

COME SCEGLIERE LE TAGLIE (MOD. 052)


INTIMO COPRI ELETTRODI

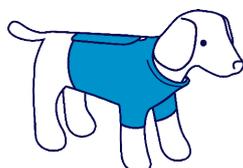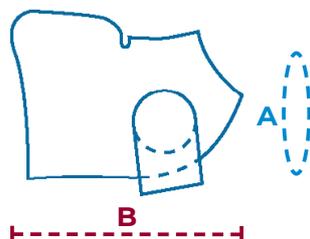

articolo	A cm	B cm	taglia	peso
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tutti i modelli sono utilizzabili per cani e gatti e indistintamente per maschi e femmine

12 MODELLI PRODOTTI

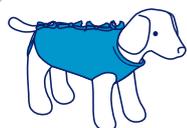


mod. 001
Protezione
ADDOME TORACE
SAGOMATA



mod. 101
Protezione
ADDOME TORACE
A NASTRO



mod. 011
Protezione
ADDOME TORACE
e ARTI ANTERIORI

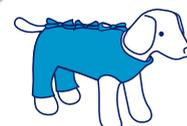

mod. 021
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI POSTERIORI



mod. 031
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI TUTTI



mod. 041
Protezione
TESTA COLLO e
ADD. SAGOMATA




mod. 051
Protezione
PORTA
HOLTER



mod. 052
Protezione
INTIMO COPRI
ELETTRODI



mod. 061
Protezione
ARTI ANTERIORI
CON LACCI

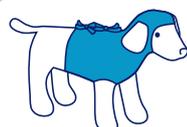

mod. 071
Protezione
TESTA COLLO e
TORACE



mod. 081
Protezione
TESTA COLLO
TORACE e ANT.RI



mod. 091
Protezione
TOTALE

Catalogo completo, listino e modulo d'ordine sono disponibili al sito

www.bendana.it