


mod. 061

come si usa **BENDANA** ARTI ANTERIORI CON LACCI



BREVETTATO

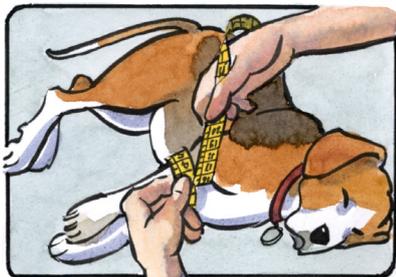

L'animale è ancora sedato, con un metro morbido misura la circonferenza dell'omero



In base alla misurazione scegli la taglia di BENDANA appropriata



Misura la lunghezza delle zampe sommata all'ampiezza del petto dell'animale (passando sotto al petto)



Piega BENDANA a metà, riporta 1/2 della misura rilevata e accorcia la protezione se questa risulta troppo lunga



Infila le zampe



Passa BENDANA sotto il fianco dell'animale e allaccialo sulla schiena con nodo e asola o con doppio nodo, tagliando l'eccedenza



Al risveglio l'animale sarà perfettamente a suo agio e protetto con BENDANA!

- Asportazione masse cutanee e noduli
- Chirurgia spalle / gomiti (es. displasie, OCD...)
- Chirurgia toraciche (es. lobectomia, pericardiotomia..)

ARTI ANTERIORI CON LACCI, fornita in nove taglie, è consigliata per le TIPOLOGIE d'INTERVENTI sopra indicati

- Lesioni diffuse di varia origine
- Ferite ascellari
- Ferite da leccamento
- Ferite da morso
- Dermatiti (es. Hot spot, atopie...)

.... e per queste PATOLOGIE COMUNI



Protezione post-operatoria ad uso veterinario per animali da compagnia
T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (Vicenza)- ITALIA
info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






BENDANA

É una **protezione post-operatoria** ad uso veterinario, pensata per coprire completamente le medicazioni, in modo sicuro e duraturo, lasciando all'animale assoluta libertà di movimento ed eliminando ogni fastidio recatogli dall'impiego di cerotto, velcro e quant'altro. É un bendaggio elastico molto semplice da usare, adattabile in pochi passaggi ad ogni razza e taglia, facile da rimuovere anche durante i controlli di routine durante la convalescenza. É realizzato in tessuto naturale di jersey ($\geq 90\%$ cotone e $5\div 10\%$ elastene). Prodotto in vari modelli, in forme e misure diverse a seconda della parte del corpo da proteggere, fornito in due soluzioni: in articoli sagomati pronti all'uso e, per i piú esperti, a nastro continuo, da tagliare secondo necessità.

PRODOTTO BREVETTATO




COME PRENDERE LE MISURE

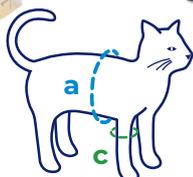



a circonferenza toracica -20% circa = **A**

c circonferenza omero = **C**

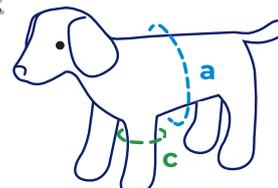


COME SCEGLIERE LE TAGLIE (MOD. 061)

ARTI ANTERIORI CON LACCI

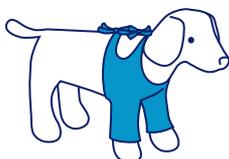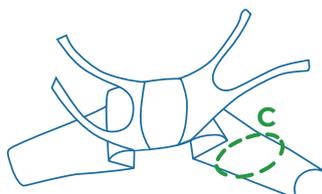

articolo	A cm	B cm	C	taglia	peso
001.20	20	32	10	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	12	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	15	XXS	5 - 7
001.35	35	50	17	XS	7 - 10
001.40	40	58	20	S	10 - 15
001.45	45	65	22	M	15 - 20
001.55	55	80	27	L	20 - 30
001.65	65	95	32	XL	30 - 40
001.75	75	110	37	XXL	40 - 50


12 MODELLI PRODOTTI

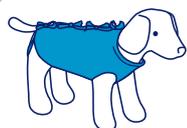


mod. 001
Protezione
ADDOME TORACE
SAGOMATA



mod. 101
Protezione
ADDOME TORACE
A NASTRO

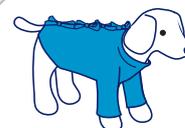

mod. 011
Protezione
ADDOME TORACE
e ARTI ANTERIORI

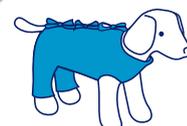

mod. 021
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI POSTERIORI



mod. 031
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI TUTTI



mod. 041
Protezione
TESTA COLLO e
ADD. SAGOMATA




mod. 051
Protezione
PORTA
HOLTER



mod. 052
Protezione
INTIMO COPRI
ELETTRODI



mod. 061
Protezione
ARTI ANTERIORI
CON LACCI

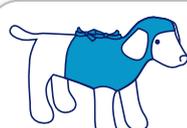

mod. 071
Protezione
TESTA COLLO e
TORACE



mod. 081
Protezione
TESTA COLLO
TORACE e ANT.RI



mod. 091
Protezione
TOTALE

Catalogo completo, listino e modulo d'ordine sono disponibili al sito

www.bendana.it