




Wie wird **BENDANA** angewendet

mod. 061 **VORDERBEINE, MIT SCHNÜREN**



PATENTIERT

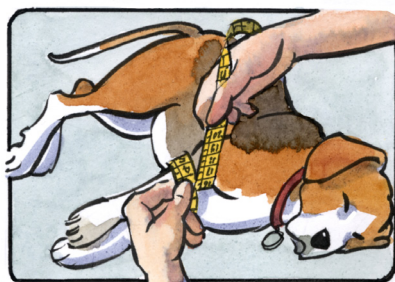


Während das Tier noch sediert ist, mit einem weichen Metermaß seinen Humerus-Umfang messen.




Anhand des Messwertes die geeignete Größe von BENDANA auswählen.




Die Länge der Beine messen und diese zur Brustbreite des Tieres (unter der Brust hindurch) addieren.

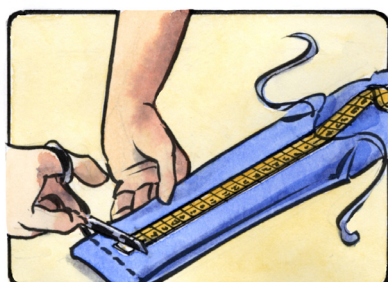

BENDANA zweifach legen, die Hälfte des genommenen Maßwertes aufmarkieren und den Schutz kürzen, wenn er zu lang ist.

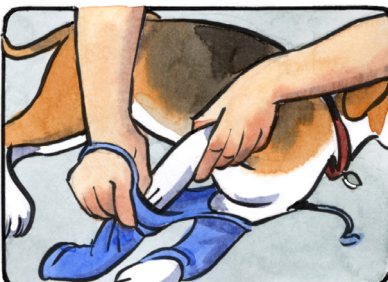

Die Beine einführen

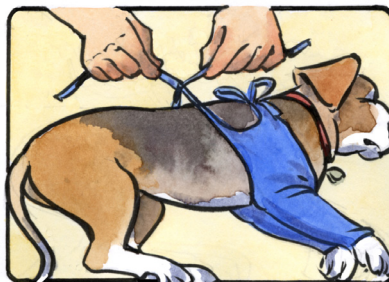

BENDANA unter der Flanke des Tieres hindurchführen und auf dem Rücken verschnüren.



Wenn es wieder aufwacht, fühlt sich das Tier mit BENDANA rundum wohl und geschützt!

- Entfernung Hautmassen und Knoten
- Operationen an Schulter/Ellenbogen (z. B. Dysplasie, OCD ...).
- Thoraxchirurgie (z. B. Lobektomie, Perikardiotomie ...)

SCHUTZ FÜR VORDERBEINE MIT SCHNÜREN, in neun Größen erhältlich. Empfohlen für die oben genannten ARTEN OPERATIVER EINGRIFFE

- Diffuse Verletzungen unterschiedlichen Ursprungs
- Achselhöhlenverletzungen
- Leckekzeme
- Bissverletzungen
- Dermatitis (z.B. Hot Spots, Atopien ...)

.... und für diese HÄUFIG VORKOMMENDEN KRANKHEITEN



Postoperativer Schutz, der in der Tiermedizin für Haustiere verwendet wird
T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (VI)- ITALIA
info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






BENDANA

Es handelt sich um einen Schutz, der in der Tiermedizin nach Operationen eingesetzt wird, um die jeweilige Medikation vollständig, sicher und dauerhaft abzudecken. Der Schutz erhält dem Tier seine volle Bewegungsfreiheit und erspart ihm das lästige Gefühl, das üblicherweise mit der Verwendung von Pflastern, Klettverschlüssen oder Ähnlichem verbunden ist. Es handelt sich um eine elastische Bandage, die sehr einfach im Gebrauch ist, sich in wenigen Schritten an jede Rasse und Größe anpassen lässt und auch für die Routinekontrollen während der Rekonvaleszenz leicht zu entfernen ist. Sie besteht aus einem natürlichem Jerseystoff ($\geq 90\%$ Baumwolle und 5% bis 10% Elastan). Bendana wird in Anpassung an den jeweils zu schützenden Körperteil in unterschiedlichen Modellen, Formen und Größen hergestellt. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen: als vorgeformter, gebrauchsfertiger Artikel und für erfahrene Anwender die als Endlosband, das nach Bedarf auf Länge geschnitten wird.


PATENTIERTES PRODUKT

WIE WIRD MASS GENOMMEN?

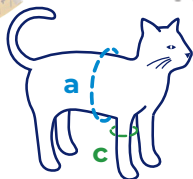


a Brustumfang - 20% circa = **A**

c Humerus-Umfang = **C**

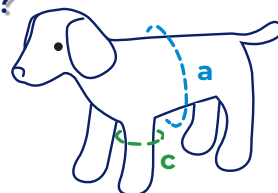

WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSEN (MODELL 061)

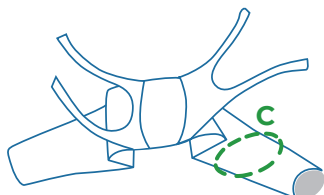

VORDERBEINE, MIT SCHNÜREN

artikel	A cm	B cm	C	Größe	Gewicht
001.20	20	32	10	XXXXXS	1 - 3
001.25	25	37	12	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	15	XXS	5 - 7
001.35	35	50	17	XS	7 - 10
001.40	40	58	20	S	10 - 15
001.45	45	65	22	M	15 - 20
001.55	55	80	27	L	20 - 30
001.65	65	95	32	XL	30 - 40
001.75	75	110	37	XXL	40 - 50

Alle Modelle sind unterschiedslos für Hunde und Katzen verwendbar.


12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001
Vorgefertigter Schutz
für **BAUCH** und
BRUST




mod. 101
Schutz für **BAUCH**
und **BRUST**, als
Endlosband

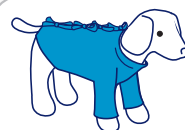


mod. 011
Schutz für **BAUCH**,
BRUST und
VORDERBEINE



mod. 021
Schutz für **BAUCH**,
BRUST und
HINTERBEINE

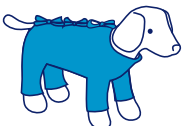

mod. 031
Schutz für **BAUCH**,
BRUST und **ALLE**
BEINE

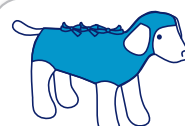

mod. 041
Vorgefertigter Schutz
für **KOPF**, **HALS**,
BAUCH




mod. 051
Schutz für
EKG-HALTER
und **ELEKTRO-**
DENBEFESTIGUNG




mod. 052
Schutz für
EKG-HALTER
und **ELEKTRO-**
DENBEFESTIGUNG



mod. 061
Schutz für
VORDERBEINE, MIT
SCHNÜREN

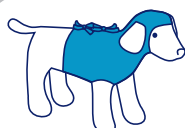

mod. 071
Schutz für **KOPF**,
HALS und **BRUST**

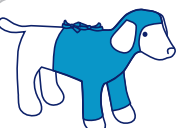

mod. 081
Schutz für **KOPF**,
HALS, **BRUST** und
VORDERBEINE



mod. 091
KOMPLETTSCHUTZ

Der vollständige Katalog, die Preisliste und das Bestellformular finden Sie auf der Website

www.bendana.it