

Wie wird **BENDANA** angewendet

mod. 081

KOPF, HALS, BRUST UND VORDERBEINE



PATENTIERT




Während das Tier noch sediert ist, mit einem weichen Metermaß seinen Brustumfang messen.



Anhand des Messwertes (abzüglich etwa 20%) die geeignete Größe von BENDANA auswählen.



Die Länge der Beine messen und diese zur Brustbreite des Tieres (unter der Brust hindurch) addieren.

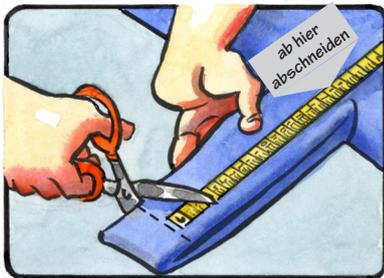

Die Hälfte der genommenen Länge aufmarkieren und die Gewebeschläuche dementsprechend kürzen.



Die Breite der Ohren prüfen und nötigenfalls die beiden halbmondförmigen Öffnungen verbreitern



Den Schutz über den Kopf ziehen, darauf achtend, dass die Ohren durch die freien Öffnungen schauen.



Die Vorderbeine in die Gewebeschläuche einführen.



Bendana über dem Rücken zusammenschnüren.



Den überschüssigen Teil des Schutzes abtrennen und die ganze Schnauze freilegen oder zwei Löcher herstellen, wo sich die Augen befinden.



Wenn es wieder aufwacht, fühlt sich das Tier mit BENDANA rundum wohl und geschützt!

- Entfernung Hautmassen und Knoten
- Operationen an Schulter/Ellenbogen (z. B. Dysplasie, OCD ...).
- Thoraxchirurgie (z. B. Lobektomie, Perikardiotomie ...)
- Operationen an Kopf/Hals (z. B. Bisswunden, Thyreoidektomie ...)

- Diffuse Verletzungen unterschiedlichen Ursprungs
- Achselhöhlenverletzungen
- Leckezeme
- Bissverletzungen
- Dermatitis (z.B. Hot Spots, Atopien ...)
- Diffuse Verbrennungen

SCHUTZ FÜR KOPF, HALS, BRUST UND VORDERBEINE, erhältlich in neun Größen. Empfohlen für die oben angegebenen ARTEN OPERATIVER EINGRIFFE

.... und für diese HÄUFIG VORKOMMENDEN KRANKHEITEN



BENDANA

Postoperativer Schutz, der in der Tiermedizin für Haustiere verwendet wird

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (VI)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






BENDANA


Es handelt sich um einen Schutz, der in der Tiermedizin nach Operationen eingesetzt wird, um die jeweilige Medikation vollständig, sicher und dauerhaft abzudecken. Der Schutz erhält dem Tier seine volle Bewegungsfreiheit und erspart ihm das lästige Gefühl, das üblicherweise mit der Verwendung von Pflastern, Klettverschlüssen oder Ähnlichem verbunden ist. Es handelt sich um eine elastische Bandage, die sehr einfach im Gebrauch ist, sich in wenigen Schritten an jede Rasse und Größe anpassen lässt und auch für die Routinekontrollen während der Rekonvaleszenz leicht zu entfernen ist. Sie besteht aus einem natürlichem Jerseystoff ($\geq 90\%$ Baumwolle und 5% bis 10% Elasthan). Bendana wird in Anpassung an den jeweils zu schützenden Körperteil in unterschiedlichen Modellen, Formen und Größen hergestellt. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen: als vorgeformter, gebrauchsfertiger Artikel und für erfahrene Anwender die als Endlosband, das nach Bedarf auf Länge geschnitten wird.

PATENTIERTES PRODUKT


WIE WIRD MASS GENOMMEN?

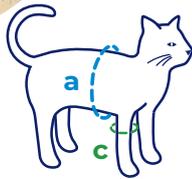

- a Brustumfang - 20% circa = A
- c Humerus-Umfang = C

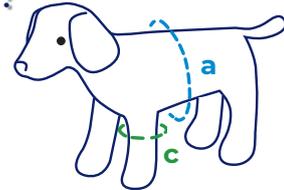

WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSEN (MODELL 081)

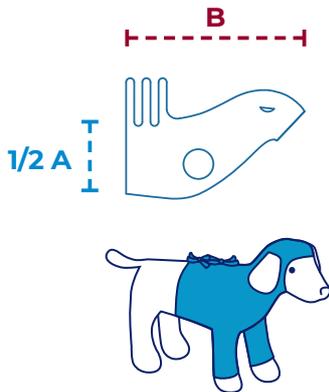

KOPF, HALS, BRUST UND VORDERBEINE

artikel	A cm	B cm	Größe	Gewicht
001.20	20	32	XXXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Alle Modelle sind unterschiedslos für Hunde und Katzen verwendbar.

12 MODELLI PRODOTTI

	mod. 001 Vorgefertigter schutz für BAUCH und BRUST		mod. 101 schutz für BAUCH und BRUST , als Endlosband		mod. 011 schutz für BAUCH, BRUST und VORDERBEINE
	mod. 021 schutz für BAUCH, BRUST und HINTERBEINE		mod. 031 schutz für BAUCH, BRUST und ALLE BEINE		mod. 041 Vorgefertigter schutz für KOPF, HALS, BAUCH
	mod. 051 schutz für EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG		mod. 052 schutz für EKG-HALTER und ELEKTRODENBEFESTIGUNG		mod. 061 schutz für VORDERBEINE, MIT SCHNÜREN
	mod. 071 schutz für KOPF, HALS und BRUST		mod. 081 schutz für KOPF, HALS, BRUST und VORDERBEINE		mod. 091 KOMPLETTSCHUTZ

Der vollständige Katalog, die Preisliste und das Bestellformular finden Sie auf der Website

www.bendana.it