

**BREVETTATO** 




L'animale è ancora sedato, con un metro morbido misura la circonferenza del torace



In base alla misurazione (-20% circa) scegli la taglia di BENDANA appropriata



Misura la lunghezza delle zampe sommata all'ampiezza del petto dell'animale (passando sotto al petto)

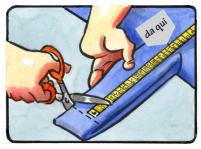


Riporta metà della lunghezza appena presa e accorcia i tubolari di conseguenza



Controlla la larghezza delle orecchie e se serve, allarga i due fori a mezzaluna



Infila la protezione dalla testa lasciando libere le orecchie

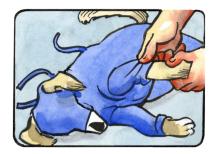

Infila le zampe anteriori e posteriori nei tubolari



Allaccia bendana sopra la schiena con nodo e asola o con doppio nodo, tagliando l'eccedenza



Taglia la protezione eccedente e scopri tutto il muso, oppure crea due fori in corrispondenza degli occhi



Al risveglio l'animale sarà perfettamente a suo agio e protetto con BENDANA!

- Asportazione masse cutanee e noduli
- Chirurgie addominali (es. enterotomia, splenectomia...)
- Chirurgia spalle / gomiti (es. displasie, OCD...)
- Chirurgia toraciche (es. lobectomia, pericardiotomia...)
- Chirurgie anche / ginocchia / bacino (es. displasie, lussazioni, traumi...)
- Chirurgie testa / collo (es. ferite da morso, tireodectomia . . .)
- Orchiectomia/sterilizzazione Maschio
- Ovaristerectomia- Ovariectomia sterilizzazione Femmina - mastectomia

- Lesioni diffuse di varia origine
- Ferite ascellari
- Ferite da leccamento
- Ferite da morso
- Dermatiti (es. Hot spot, atopie...)
- Ustioni diffuse

.... e per queste PATOLOGIE COMUNI

PROTEZIONE TOTALE, fornita in nove taglie, è consigliata per le TIPOLOGIE d'INRERVENTI sopra indicati








É una **protezione post-operatoria** ad uso veterinario, pensata per coprire completamente le medicazioni, in modo sicuro e duraturo, lasciando all'animale assoluta libertá di movimento ed eliminando ogni fastidio recatogli dall'impiego di cerotto, velcro e quant'altro. É un bendaggio elastico molto semplice da usare, adattabile in pochi passaggi ad ogni razza e taglia, facile da rimuovere anche durante i controlli di routine durante la convalescenza. É realizzato in tessuto naturale di jersey (≥ 90% cotone e 5÷10% elastene). Prodotto in vari modelli, in forme e misure diverse a seconda della parte del corpo da proteggere, fornito in due soluzioni: in articoli sagomati pronti all'uso e, per i piu esperti, a nastro continuo, da tagliare secondo necessitá.




## COME PRENDERE LE MISURE

- a circonferenza toracica -20% circa = A
- c circonferenza omero = C

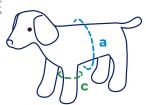

## COME SCEGLIERE LE TAGLIE (MOD. 091)

## PROTEZIONE TOTALE

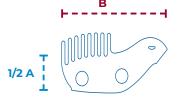



articolo	<b>A</b> cm	<b>B</b> cm	taglia	peso
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001. 35	35	50	XS	7 - 10
001. 40	40	58	S	10 - 15
001. 45	45	65	М	15 - 20
001. 55	55	80	L	20 - 30
001. 65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Tutti i modelli sono utilizzabili per cani e gatti e indistintamente per maschi e femmine

## 12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001
Protezione
ADDOME TORACE
SAGOMATA



mod. 101
Protezione
ADDOME TORACE
A NASTRO



mod. 011
Protezione
ADDOME TORACE
e ARTI ANTERIORI



mod. 021
Protezione
ADDOME TORACE e
ARTI POSTERIORI



mod. 031 Protezione ADDOME TORACE e ARTI TUTTI



mod. 041
Protezione
TESTA COLLO e
ADD. SAGOMATA



mod. 051
Protezione
PORTA
HOLTER



mod. 052 Protezione INTIMO COPRI ELETTRODI



mod. 061
Protezione
ARTI ANTERIORI
CON LACCI



mod. 071
Protezione
TESTA COLLO e
TORACE



mod. 081 Protezione TESTA COLLO TORACE e ANT.RI



mod. 091 Protezione TOTALE