

Wie wird **BENDANA** angewendet

KOMPLETTSCHUTZ



PATENTIERT



mod 091


Während das Tier noch sediert ist, mit einem weichen Metermaß seinen Brustumfang messen.



Anhand des Messwertes (abzüglich etwa 20%) die geeignete Größe von BENDANA auswählen.



Die Länge der Beine messen und diese zur Brustbreite des Tieres (unter der Brust hindurch) addieren.

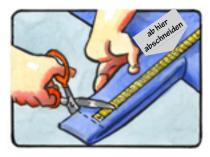


Die Hälfte der genommenen Länge aufmarkieren und die Gewebeschläuche dementsprechend kürzen.



Die Breite der Ohren prüfen und nötigenfalls die beiden halbmondförmigen Öffnungen verbreitern



Den Schutz über den Kopf ziehen, darauf achtend, dass die Ohren durch die freien Öffnungen schauen.

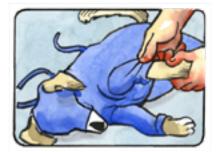

Die Vorder- und Hinterbeine in die Gewebeschläuche einführen.



Bendana über dem Rücken zusammen-



Den überschüssigen Teil des Schutzes abtrennen und die ganze Schnauze freilegen oder zwei Löcher herstellen, wo sich die Augen befinden.

Wenn es wieder aufwacht, fühlt sich das Tier mit BENDANA rundum wohl und geschützt!

- •Entfernung Hautmassen und Knoten
- •Operationen am Bauch (z. B. Enterotomie, Splenektomie ...)
- •Operationen an Schulter/Ellenbogen (z. B. Dysplasie, OCD ...).
- •Thoraxchirurgie (z. B. Lobektomie, Perikardiotomie ...)
- •Operationen an Hüfte/Knie/Becken (z. B. Dysplasie, Luxationen, Traumata ...)
- •Operationen an Kopf/Hals (z. B. Bisswunden, Thyreoidektomie ...)
- •Orchiektomie / Sterilisation bei männlichen
- •Ovariohysterektomie Ovariektomie Sterilisation bei weiblichen Tieren Mastektomie

KOMPLETTSCHUTZ, in neun Größen erhältlich. Empfohlen für die oben genannten ARTEN OPERATIVER EINGRIFFE



- Achselhöhlenverletzungen
- Leckekzeme
- Bissverletzungen
- Dermatitis (z.B. Hot Spots, Atopien ...)
- Diffuse Verbrennungen

.... und für diese HÄUFIG VORKOMMENDEN KRANKHEITEN








Es handelt sich um einen Schutz, der in der Tiermedizin nach Operationen eingesetzt wird, um die jeweilige Medikation vollständig, sicher und dauerhaft abzudecken. Der Schutz erhält dem Tier seine volle Bewegungsfreiheit und erspart ihm das lästige Gefühl, das üblicherweise mit der Verwendung von Pflastern, Klettverschlüssen oder Ähnlichem verbunden ist. Es handelt sich um eine elastische Bandage, die sehr einfach im Gebrauch ist, sich in wenigen Schritten an jede Rasse und Größe anpassen lässt und auch für die Routinekontrollen während der Rekonvaleszenz leicht zu entfernen ist. Sie besteht aus einem natürlichem Jerseystoff (≥ 90% Baumwolle und 5% bis 10% Elastan). Bendana wird in Anpassung an den jeweils zu schützenden Körperteil in unterschiedlichen Modellen, Formen und Größen hergestellt. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen: als vorgeformter, gebrauchsfertiger Artikel und für erfahrene Anwender die als Endlosband, das nach Bedarf auf Länge geschnitten wird.

PATENTIERTES PRODUKT





- a Brustumfang 20% circa = A
- c Humerus-Umfang= C

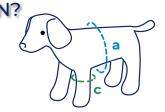

WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSEN (MODELL 091)





KOMPLETTSCHUTZ

| artikel | A cm | B cm | Größe | Gewicht |
|---------|-------------|-------------|-------|---------|
| 001.20 | 20 | 32 | XXXXS | 1 - 3 |
| 001.25 | 25 | 37 | XXXS | 3 - 5 |
| 001.30 | 30 | 44 | XXS | 5 - 7 |
| 001. 35 | 35 | 50 | XS | 7 - 10 |
| 001. 40 | 40 | 58 | S | 10 - 15 |
| 001. 45 | 45 | 65 | М | 15 - 20 |
| 001. 55 | 55 | 80 | L | 20 - 30 |
| 001. 65 | 65 | 95 | XL | 30 - 40 |
| 001.75 | 75 | 110 | XXL | 40 - 50 |

Alle Modelle sind unterschiedslos für Hunde und Katzen verwendbar.

12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001 Vorgefertigter schutz für BAUCH und BRUST



mod. 101 schutz für BAUCH und BRUST, als Endlosband



mod. 011 schutz für BAUCH, BRUST und VORDERBEINE



mod. 021 schutz für BAUCH, BRUST und HINTERBEINE



mod. 031 schutz für BAUCH, BRUST und ALLE BEINE



mod. 041 Vorgefertigter schutz für KOPF, HALS, BAUCH



mod. 051 schutz für EKG-HALTER und ELEKTRO-DENBEFESTIGUNG



mod. 052 schutz für EKG-HALTER und ELEKTRO-DENBEFESTIGUNG



mod. 061 schutz für VORDERBEINE, MIT SCHNÜREN



mod. 071 schutz für KOPF, HALS und BRUST



mod. 081 schutz für KOPF, HALS, BRUST und VORDERBEINE



mod. 091 KOMPLETTSCHUTZ