

Wie wird **BENDANA** angewendet

mod. 011

SCHUTZ FÜR BAUCH, BRUST UND VORDERBEINE



PATENTIERT



Während das Tier noch sediert ist, mit einem weichen Metermaß seinen Brustumfang messen.



Vom gemessenen Wert etwa 20% abziehen. Anhand des sich so ergebenden Wertes die sachgerechte Größe von BENDANA wählen.



Die Bauchbreite zwischen den beiden Beinen messen.



Den Schutz doppelt legen und die Hälfte des genommenen Maßwertes aufmarkieren. Dann die vorhandenen Schnitte bei Bedarf verbreitern.



Falls erforderlich, bei zusammengefaltetem Schutz eine Öffnung für die männlichen Genitalien herstellen.



Die Vorderbeine in die Gewebeschläuche einführen



Die Hinterpfoten in die zuvor hergestellten Öffnungen einführen



BENDANA unter der Flanke des Tieres hindurchführen und auf dem Rücken verschnüren.



Wenn es wieder aufwacht, fühlt sich das Tier mit BENDANA rundum wohl und geschützt!

- Entfernung Hautmassen und Knoten
- Operationen am Bauch (z. B. Enterotomie, Splenektomie ...)
- Operationen an Schulter/Ellenbogen (z. B. Dysplasie, OCD ...).
- Thoraxchirurgie (z. B. Lobektomie, Perikardiotomie ...)
- Ovariohysterektomie - Ovariectomie - Sterilisation bei weiblichen Tieren - Mastektomie

- Diffuse Verletzungen unterschiedlichen Ursprungs
- Achselhöhlenverletzungen
- Leckezeme
- Bissverletzungen
- Dermatitis (z.B. Hot Spots, Atopien...)

SCHUTZ FÜR BAUCH, BRUST UND VORDERBEINE, in neun Größen erhältlich. Empfohlen für die oben genannten ARTEN OPERATIVER EINGRIFFE.

.... und für diese HÄUFIG VORKOMMENDEN KRANKHEITEN



Postoperativer Schutz, der in der Tiermedizin für Haustiere verwendet wird

T +39 0444 550361 F +39 0444 550268 Arcugnano (VI)- ITALIA

info@bendana.it - www.bendana.it - P. IVA IT03652540240 - n. R.E.A. VI-342637






BENDANA

Es handelt sich um einen Schutz, der in der Tiermedizin nach Operationen eingesetzt wird, um die jeweilige Medikation vollständig, sicher und dauerhaft abzudecken. Der Schutz erhält dem Tier seine volle Bewegungsfreiheit und erspart ihm das lästige Gefühl, das üblicherweise mit der Verwendung von Pflastern, Klettverschlüssen oder Ähnlichem verbunden ist. Es handelt sich um eine elastische Bandage, die sehr einfach im Gebrauch ist, sich in wenigen Schritten an jede Rasse und Größe anpassen lässt und auch für die Routinekontrollen während der Rekonvaleszenz leicht zu entfernen ist. Sie besteht aus einem natürlichem Jerseystoff ($\geq 90\%$ Baumwolle und 5% bis 10% Elastan). Bendana wird in Anpassung an den jeweils zu schützenden Körperteil in unterschiedlichen Modellen, Formen und Größen hergestellt. Erhältlich ist das Produkt in zwei Ausführungen: als vorgeformter, gebrauchsfertiger Artikel und für erfahrene Anwender die als Endlosband, das nach Bedarf auf Länge geschnitten wird.


PATENTIERTES PRODUKT

WIE WIRD MASS GENOMMEN?

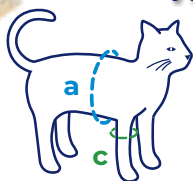


a Brustumfang - 20% circa = **A**

c Humerus-Umfang = **C**

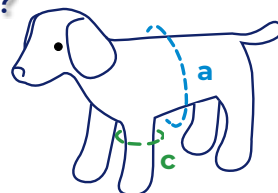

WAHL DER RICHTIGEN GRÖSSEN (MODELL 011)

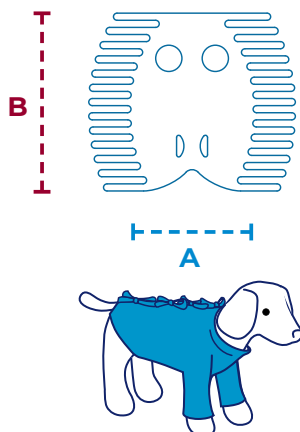

BAUCH UND BRUST UND VORDERBEINE


artikel	A cm	B cm	Größe	Gewicht
001.20	20	32	XXXXS	1 - 3
001.25	25	37	XXXS	3 - 5
001.30	30	44	XXS	5 - 7
001.35	35	50	XS	7 - 10
001.40	40	58	S	10 - 15
001.45	45	65	M	15 - 20
001.55	55	80	L	20 - 30
001.65	65	95	XL	30 - 40
001.75	75	110	XXL	40 - 50

Alle Modelle sind unterschiedslos für Hunde und Katzen verwendbar.


12 MODELLI PRODOTTI



mod. 001
Vorgefertigter schutz
für **BAUCH und
BRUST**

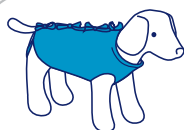


mod. 101
schutz für **BAUCH
und BRUST**, als
Endlosband

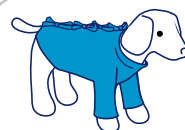


mod. 011
schutz für **BAUCH,
BRUST und
VORDERBEINE**



mod. 021
schutz für **BAUCH,
BRUST und
HINTERBEINE**

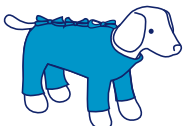

mod. 031
schutz für **BAUCH,
BRUST und ALLE
BEINE**

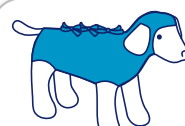

mod. 041
Vorgefertigter schutz
für **KOPF, HALS,
BAUCH**




mod. 051
schutz für
**EKG-HALTER
und ELEKTRO-
DENBEFESTIGUNG**




mod. 052
schutz für
**EKG-HALTER
und ELEKTRO-
DENBEFESTIGUNG**



mod. 061
schutz für
**VORDERBEINE, MIT
SCHNÜREN**

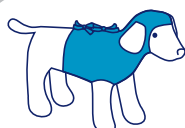

mod. 071
schutz für **KOPF,
HALS und BRUST**

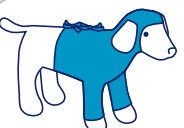

mod. 081
schutz für **KOPF,
HALS, BRUST und
VORDERBEINE**



mod. 091
KOMPLETTSCHUTZ

Der vollständige Katalog, die Preisliste und das Bestellformular finden Sie auf der Website

www.bendana.it